Guida all'uso del database TUCC

Data rilascio:

Menù Collections

Questo menù permette di accedere alle collezione per eseguire operazioni relative alla collezione selezionata.

Al momento la TUCC contiene 6 collezioni:

- Mycotheca Universitatis Taurinensis (MUT)
- Collection MiAGR settore Microbiologia Alimentare, Agraria e Ambientale
- Collection MiAGR settore Patologia vegetale forestale
- Collection MiBAT settore microbiologia clinica umana
- Collection MiVET settore Microbiologia Clinica Veterinaria
- Collection MiVET settore Parassitologia

Browse strains

Questa funzione permette di accedere all'elenco completo dei ceppi. I ceppi sono visibili secondo il livello di privileggio.

I risultati sono presentati in una tabella con 4 colonne: Accession number, Genus, Specific epithet, Varietas / Forma Specialis

Il codice d'accesso è un link che permette di aprire la scheda ceppo

Menù Search

Questa funzione permette di ricercare dei ceppi in tutte le 6 collezioni della TUCC.

La ricerca può essere eseguita specificando il nome del campo oppure su tutti i campi (All fields).

I risultati sono presentati in una tabella dove il codice d'accesso è costituito da un link alla scheda ceppo.

Menù Admin

Authorize an user

Questa funzione richiede il livello di privileggio Administrator nella o nelle collezioni corrispondenti

- 1. digitare l'indirizzo email dell'utente da abilitare e premere Submit
- 2) Impostare il livello di privileggio per il nuovo utente per ciascuna collezioni (sono visibili solo le collezioni sulle quali si possiede il livello Administrator)

I livelli di privileggio sono i seguenti:

Menu Admin > Authorize an user

None

Nessun livello di privileggio. L'utente sarà considerato come Guest su quella collezione

Administrator

Livello di privileggio più elevato. L'utente può eseguire tutte le operazioni sulla collezione e abilitare e rimuover utenti.

Advanced user

Internal user

User

List of authorized users

Questa funzione richiede il livello di privileggio Administrator nella o nelle collezioni corrispondenti Menu Admin > List of authorized users

Questa funzione permette di accedere all'elenco degli utenti abilitati e di modificare il livello di privileggi (pulsante roles)

Export all collections to MIRRI

Questa funzione richiede il livello di privileggio Administrator nella o nelle collezioni corrispondenti Menu Admin > Export all collections to MIRRI

Questa funzione permette di esportare i ceppi selezionati (campo Export to MIRRI impostato a Yes) in un formato Microsoft-Excel compatibile con il database MIRRI.

Web service version

Ouesta funzione visualizza la versione del web service

Web site analytics

Questa voce permette di acceddere a statistiche di accesso del web service TUCC

Scheda ceppo


La scheda ceppo visualizza tutti i campi relativi al ceppo selezionato.

I campi sono visibili secondo il livello di privileggio

Exempio di scada ceppo:

Accession number: MUT00000002

Go back

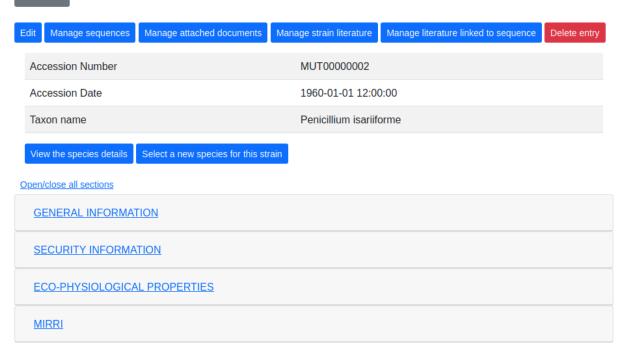

Di default le sezioni di campi GENERAL INFORMATION, SECURITY INFORMATION, ECO-PHYSIOLOGICAL PROPERTIES e MIRRI sono ripiegate. Un click sul nome della categoria permette di aprirela o ripiegarla. Un click su Open/Close all sections permette di aprire o ripiegare tutte le sezioni.

Esempio di campi visualizzati. Vengono visualizzati i campi anche se non contengono valori

Open/close all sections

GENERAL INFORMATION	
Genus	Penicillium
Specific epithet	isariiforme
Varietas / Formae Specialis	
Phylum	
Class	Eurotiomycetes
Order	Eurotiales
Family	Aspergillaceae
Organism type	Fungus
Author	Stolk & J. A. Meyer
Original acronym	
Depositor	
Collector	

Varie funzioni sono accessibili dalla scheda ceppo:

Edit

Funzione per editare i campi della scheda ceppo. Richiede un livello di privilegi adeguato.

Manage sequences

Questa funzione permette di aggiungere, modificare o rimuovere le sequenze nucleotidiche relative al ceppo.

Sequences for MUT00000084

Sequences list



La sequenza nucleotidica può essere visualizzata cliccando sul suo codice d'accesso (se fornito) oppure su i primi 10 nucleotidi della sequenza.

Aggiungere/modificare una sequenza

Premere sul pulsante Add a new sequence o sul pulsante Edit corrispondente alla sequenza da modificare.

Edit sequence for MUT00000084

arker
ITS1-ITS4
ame of the sequences marker
escription
ISDC Accession number
KT699117
ccession number for the sequence in INSDC. ucleotide sequence
CCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAGTTCATGCCCTCACGGGTAGATCTCCCACCCTTGTGTAATTATAATTATCT GTTGCTTTGGCGGGCCGCGAGTCTTCTCGCCCTGTGTGCCCCGCCAGAGGACCAATAAACTCTGAATGTTAGTGTCGTCTGA GTACTATATAATAGTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAT GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGA GCGTCATTATGACCAATCCAGCTTGCTGGGTCTTGGGCTGCCCCCTGGCGGGCCCTTAAAAACAGTGGCGGTGCTCTCC AGCTCTACGCGTAGTAATTATTCTCGCGATTGGGTCTGGAGGGATGCTTGCCAACACCCCCAACTTTCTTAGGTTGACC
nly nucleotide (degenerated nucleotides allowed. See <u>IUPAC nucleotide code</u>) . Submit sequence

Immettere i dati nei vari campi.

Il campo INSDC Accession number deve contenere un codice d'accesso valido.

Nel campo Nucleotide sequence solo nucleotidi sono accettati. Vedere il codice IUPAC per i nucleotidi Salvare la sequenza premendo il pulsante Submit sequence

Manage attached documents

Questa funzione permette di allegare documenti al ceppo. Alcuni tipi di documento sono definiti (PIC, MTA, MAA, MIRRI ABS related file, MIRRI MTA file) Per caricare un documento di tipo non predefinito scegliere Other il sistema richiederà il tipo di documento allegato Other document type.

Utilizzare il pulsante Browse per scegliere il documento e quindi premere Upload file per salvarlo.

Manage strain literature

Manage strain literature linked to sequence

Delete entry

Questa funzione richiede il livello di privileggio Administrator nella o nelle collezioni corrispondenti Questa funzione permette di cancellare il ceppo, non sarà più visibile a nessun utente.

Un ceppo cancellato (Deleted) potrà essere ripristinao da un utente Administrator (vedere Deleted entries)

View the species details

Questa funzione permette di visualizzare i dettagli della specie del ceppo:


Species Penicillium glabrum

Edit Browse species	
Genus	Penicillium
Epithet	glabrum
Varietas	
Phylum	Ascomycota
Class	Eurotiomycetes
Order	Eurotiales
Family	Aspergillaceae
Author	(Wehmer) Westling
Organism type	Fungus
Number of strains	49
Number of strains in quarantine	0

La specie può essere modificata premendo sul pulsante Edit. Le modifiche apportate alla specie saranno applicate a tutti i ceppi di quella specie.

Edit species Penicillium glabrum

Number of strains: **49** Number of strains in quarantine: **0**

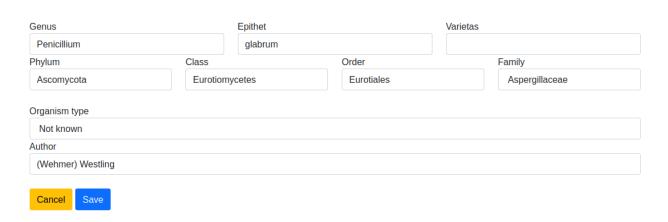


Select a new species for this strain

Questa funzione permette di modificare la specie del ceppo.

Digitare i primi carattere del genere e quindi selezionare la specie nell'elenco proposto. Premere il pulsante Submit per assegnare la nuova specie al ceppo.

Select a new species for the strain MUT00000008

The current species is: Penicillium glabrum .

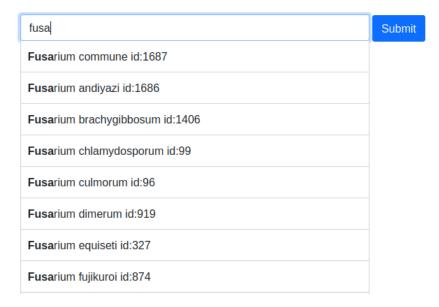

Pagina Super admin

La pagina Super admin permette di accedere a funzioni utili per la manutenzpone del database

Indexes of field

Questa funzione presenta una tabella contenente tutti i campi della record ceppo.

field name		
Accession Number	all values	<u>distinct values</u>
Accession Date	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Type strain	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Pathogenicity risk for animals and humans		<u>distinct values</u>
3 3 3	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Toxins production	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Kind of deposit	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Genus	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
1 1	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Varietas / Formae Specialis	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Author	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Dual use organism	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
Quarantine condition	all values	<u>distinct values</u>
Condition	all values	<u>distinct values</u>
Known method of preservation	<u>all values</u>	<u>distinct values</u>
	Accession Number Accession Date Type strain Pathogenicity risk for animals and humans Pathogenicity for vegetals Toxins production Kind of deposit Genus Specific epithet Varietas / Formae Specialis Author Dual use organism Quarantine condition Condition	Accession Number Accession Date Accession Date Type strain Pathogenicity risk for animals and humans Pathogenicity for vegetals Pathogenicity for vegetals Toxins production All values Kind of deposit Genus Specific epithet Varietas / Formae Specialis Author Dual use organism Quarantine condition all values Condition All values all values

Per ogni campo 2 link sono disponibili:

All values

Questo link permette di accedere ai valori del campo selezionato per tutti i ceppi del database. Cliccando sul codice d'accesso si accede alla scheda ceppo.

accession number	Value of Original acronym (field #44)
MUT00000002	
MUT00000003	Tq MEA 4Ae
MUT0000004	
MUT00000005	
MUT00000006	
MUT00000007	Tq PolyR 2Bb
MUT00000008	T4 PolyR G8a
MUT00000009	T4 PolyR E10b
MUT00000010	
MUT00000011	148
MUT00000012	T4 PolyR E6a
MUT00000013	T4 MEA F10a
MUT00000014	
MUT00000015	
MUT00000016	T4 PolyR H5a

Distinct values

questo link permette di visualizzare tutti i valori distinti del campo selezionato con il numero di ceppi corrispondenti.

Distinct values for 'Kind of deposit' (field #7):

Number of strains	Value
2325	
3831	Free for unrestricted distribution
263	Not free for unrestricted distribution
110	Safe deposit

Elenco dei campi

Accession Number

indice del campo: 1 Tipo di campo: text campo automatico: Y Minimum Data Set: N

Il sistema attribuisce un codice d'accesso costituito da TUCC seguito da 8 ciffra in ordine progressivo. Un codice d'accesso già attribuito non sarà più reattribuito anche in caso di cappo cancellato o morto.

Per la collezione MUT il codice d'accesso comincia con la stringa MUT

Accession Date

indice del campo: 2 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Ν

Genus

indice del campo: 8
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: Y
Campo obbligatorio: N
Descrizione del campo:MDS

Specific epithet

indice del campo: 9
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: Y
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:

Varietas / Formae Specialis

indice del campo: 10 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Phylum

indice del campo: 60 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Class

indice del campo: 69
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Order

indice del campo: 70
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Family

indice del campo: 71 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Organism type

indice del campo: 73 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Fungus Yeast Bacterium Alga Archaea Cyanobacteria Phage Virus Plasmid

campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: N Descrizione del campo:

Author

indice del campo: 11
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N
Descrizione del campo:

Original acronym

indice del campo: 44
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Unofficial names that are often used for the strain, e.g. in publications, or a name given to the strain by the isolator before its deposit at the collection.

Depositor

indice del campo: 39 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Name, institute and town / country of the depositor.

Collector

indice del campo: 37 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Name, institute and town / country of the collector.

Date of collection

indice del campo: 38 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Date when the sample was collected. Allowed formats: YYYY, YYYY-MM,

YYYY-MM-DD

Isolator

indice del campo: 31 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Name, institute and town / country of the isolator.

Date of isolation

indice del campo: 32 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Original substrate

indice del campo: 33 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Information about the substrate and the host of isolation of the strain. It may include the detailed substrate from which the strain was isolated and the name of host plant/animal.

Isolation method

indice del campo: 41
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N
Descrizione del campo:

Habitat (ecological data)

indice del campo: 34 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Information about the biotope where the species was found. It should include environmental physical factors, such as humidity, range of temperature, pH and light intensity, as well as biotic factors, such as theavailability of food and the presence or absence of predators. It may also include information already specified in the related fields Geographic origin, Geographic origin coordinates and Altitude.

Geographical origin (country, province, place)

indice del campo: 35
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: Y
Campo obbligatorio: N
Descrizione del campo:

GPS coordinates

indice del campo: 36
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N
Descrizione del campo:

Questo campo è presente per motivi di retrocompatibilità con il database MUT. NON deve essere compilato.

Latitude (decimal)

indice del campo: 101

Tipo di campo: numero a virgola

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Usare il punto (.) come separatore decimale

Esempio di valori validi:

45.45-20.9

Longitude (decimal)

indice del campo: 100

Tipo di campo: numero a virgola

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Usare il punto (.) come separatore decimale

Esempio di valori validi:

- 7.45
- -20.9

Altitude (m)

indice del campo: 103

Tipo di campo: numnero intero positivo o negativo

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N Esempi di valori validi:

28901550

• -15

Continent

indice del campo: 105 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Africa Antartica Asia Europe North America Oceania South America

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Questo campo è compilato automaticamente quando l'utente clicca sulla mappa. Può esssere

sovrascitto in caso di errore

Country

indice del campo: 106 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Questo campo è compilato automaticamente quando l'utente clicca sulla mappa. Può esssere

sovrascitto in caso di errore

State

indice del campo: 107
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: State or region

Questo campo è compilato automaticamente quando l'utente clicca sulla mappa. Può esssere sovrascitto in caso di errore

Town

indice del campo: 108 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Questo campo è compilato automaticamente quando l'utente clicca sulla mappa. Può esssere

sovrascitto in caso di errore

Place

indice del campo: 109 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Questo campo è compilato automaticamente quando l'utente clicca sulla mappa. Può esssere

sovrascitto in caso di errore

Received from (if not name of collector or isolator)

indice del campo: 43 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Indicare il nome, il cognome, l'istituto (se presente), il comune e paese.

Identified by

indice del campo: 40 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Indicare il nome, il cognome, l'istituto (se presente), il comune e paese.

Location of herbarum specimen

indice del campo: 42 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Growth condition medium

indice del campo: 47

Tipo di campo: text valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The medium that is recommend for growing the strain.

Indicare il mezzo colturale raccomandato per la crescita del ceppo

Growth condition temperature

indice del campo: 48

Tipo di campo: numero a virgola

campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo:- The recommended growing temperature for the strain. Example: 24

Indicare la temperatura raccomandata per la crescita del ceppo in gradi Celsius. Usare il punto (.) come separatore decimale. Non immetere l'unità.

Esempi di valori validi:

• 25

• 37.5

Sexual sporulation condition medium

indice del campo: 49
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Sexual sporulation condition temperature

indice del campo: 50
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Usare il punto (.) come separatore decimale. Non immetere l'unità.

Esempi di valori validi:

• 25

• 37.5

Mating type

indice del campo: 51

Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Self sporulation

indice del campo: 52 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Known method of preservation

indice del campo: 15

Tipo di campo: multiselect

valori autorizzati: Lyophilisation Cryopreservation Agar Water Oil Other

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Patented strain

indice del campo: 55 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Indicare se il ceppo è protetto da brevetto.

Patent number

indice del campo: 85 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Se il ceppo è protetto da brevetto indicare il numero del brevetto

Type strain

indice del campo: 3 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Holotype Isotype Lectotype Sintype Neotype Epitype

campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y Descrizione del campo:

Deposited in other collection

indice del campo: 23 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y Descrizione del campo:

Indicare se il ceppo è stato depositato in una altra collezione

Collection and number

indice del campo: 83 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Se il ceppo è stato depositato in una altra collezione indicare la collezione e il codice d'accesso del

ceppo.

Additional Data

indice del campo: 96
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Pathogenicity risk for animals and humans

indice del campo: 4 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known H0 H1 H2 H3

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Pathogenic for species

indice del campo: 80 Tipo di campo: textarea campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Se il ceppo è patogeno per animali e/o umani indicare le specie seprate da virgola.

Safety level

indice del campo: 21 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known BSL-1 BSL-2 BSL-3

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Precaution required

indice del campo: 22 Tipo di campo: textarea campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Pathogenicity for vegetals

indice del campo: 5 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known P0 P1 P2 P3

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Phytopathogenic for species

indice del campo: 81 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Se il ceppo è patogeno per vegetali indicare le specie seprate da virgola.

Toxins production

indice del campo: 6 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known T0 T1 T2 T3

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Specify toxins

indice del campo: 79
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Se il ceppo produce tossine indicare quali separate da virgola.

Hallucinogenic toxins

indice del campo: 62 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Specify hallucinogenic

indice del campo: 63
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Se il ceppo produce tossine allucinogene indicare quali separate da virgola.

Quarantine condition

indice del campo: 13 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Specify whether the strain is subject to quarantine according to European Directive 2000/29/CE and its amendments and corrections. The list of quarantine organisms is available in the Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072.

Specify legislation for quarantine

indice del campo: 86 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Dual use organism

indice del campo: 12 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Specify whether the strain has the potential for a harmful use according to EU

Council Regulation 2000/1334/CE and its amendments and corrections.

Specify legislation for dual use

indice del campo: 87
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Biological interactions

indice del campo: 46
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Properties-Application

indice del campo: 45 Tipo di campo: textarea campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Information about applications of the strain.

Contains plasmides

indice del campo: 56 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Specify plasmides

indice del campo: 82
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Information about plasmids in the strain. It may include plasmid name and type (original plasmid, cloning vehicle, recombinant plasmid), restriction sites, relevant genes (e.g., origin of replication, transposons, promoters, terminators, structural genes).

Se il ceppo contiene plasmidi indicare quali

Genetically modified

indice del campo: 57 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Specify modifications

indice del campo: 90 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Se il ceppo è stato geneticamente modificato indicare quali modifiche.

Kind of deposit

indice del campo: 7 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Safe deposit Free for unrestricted distribution Not free for unrestricted distribution

campo automatico: N Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: Y Descrizione del campo:

Specify restriction for deposit

indice del campo: 68
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N

Campo obbligatorio: N

Condition

indice del campo: 14 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Alive Dead

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Mode of preservation

indice del campo: 16

Tipo di campo: multiselect

valori autorizzati: Lyophilisation Cryopreservation Agar Water Oil Other

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Date of lyophilization

indice del campo: 29 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

Tube number of lyophilized

indice del campo: 164

Tipo di campo: numero intero

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Number of tubes of the lyophilized strain

Localisation of lyophilized

indice del campo: 17
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Date of cryopreservation -80

indice del campo: 30 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

Localisation cryopreserved -80

indice del campo: 18
Tipo di campo: text
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Tube number -80

indice del campo: 167

Tipo di campo: numero intero

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Date of cryopreservation -152

indice del campo: 165 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

Localisation cryopreserved -152

indice del campo: 166 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Tube number -152

indice del campo: 168

Tipo di campo: numero intero

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Last transfert

indice del campo: 27 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

AG specify

indice del campo: 88 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Ν

Last check

indice del campo: 28 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

Next transfert date

indice del campo: 95 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Allowed formats: YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD

Form of supply

indice del campo: 19

Tipo di campo: text valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: Y Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:MDS

Restricted item

indice del campo: 20 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Ν

Specify restriction

indice del campo: 89 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Ν

Additional data and General remarks

indice del campo: 24 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

N

MUT sequences

indice del campo: 25 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati:

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

N

Deposited MUT sequences

indice del campo: 26
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Ν

Attached documents type

indice del campo: 53 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Ν

Distribution

indice del campo: 58
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Ν

MDS

indice del campo: 97
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

PIC

indice del campo: 54
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: Y

MTA

indice del campo: 74
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Ν

MAA

indice del campo: 75
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Ν

Tossine

indice del campo: 76
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Patogeni

indice del campo: 94
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Other (1)

indice del campo: 77 Tipo di campo: file valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Other (2)

indice del campo: 78
Tipo di campo: file
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

preservation_lyo

indice del campo: 150 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

preservation_cryo

indice del campo: 151 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

preservation_agar

indice del campo: 152 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

preservation_water

indice del campo: 153 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

preservation_oil

indice del campo: 154 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

known_preservation_lyo

indice del campo: 160 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

known_preservation_cryo

indice del campo: 161 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

known_preservation_agar

indice del campo: 162 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

known_preservation_water

indice del campo: 163 Tipo di campo: select

valori autorizzati: Not known Yes No

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Export to MIRRI

indice del campo: 252

Tipo di campo: select valori autorizzati:No|Yes campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Export this record to MIRRI

MIRRI Other culture collection numbers

indice del campo: 200
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Accession numbers of the same strain in other CCs, when known.

Questo campo è compilato automaticamente con il contenuto del campo Collection and number (indice

83)

MIRRI Restrictions on use

indice del campo: 201 Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:no restrictions apply 2:for research only 3:for commercial development a special

agreement is requested

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Report if the strain can be used for commercial development or not.

MIRRI Nagoya protocol compliance conditions

indice del campo: 202 Tipo di campo: select

valori autorizzati:1: Not known restrictions under the Nagoya protocol 2:Documents providing proof of legal access and terms of use available at the collection 3:Strain probably in scope, please contact the

culture collection

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo:Situation of the strain in relation to the Nagoya protocol.

MIRRI ABS related files

indice del campo: 203 Tipo di campo: text valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

MIRRI MTA file

indice del campo: 204
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

MIRRI Strain from a Registered Collection

indice del campo: 205 Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:No 2:Yes

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Strain included in the registered CC according to the EU Regulation 511/2014. Unregistered CCs can omit this information.

MIRRI Risk Group

indice del campo: 251 Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:1 2:2 3:3 4:4

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Risk group according to EU Directive 2000/54/EC and its amendments and

corrections.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Biosafety level

indice del campo: 206 Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:BSL-1 2:BSL-2 3:BSL-3 4:BSL-4

campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Dual use

indice del campo: 207

Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:No 2:Yes

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Specify whether the strain has the potential for a harmful use according to EU Council Regulation 2000/1334/CE and its amendments and corrections.

Ouesto campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Quarantine in Europe

indice del campo: 208 Tipo di campo: select

valori autorizzati: 1:No 2:Yes

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Specify whether the strain is subject to quarantine according to European Directive 2000/29/CE and its amendments and corrections. The list of quarantine organisms is available in the Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Organism type

indice del campo: 209 Tipo di campo: select valori autorizzati:

- 1:Algae
- 2:Archaea
- 3:Bacteria
- 4:Cyanobacteria
- 5:Filamentous Fungi
- 6:Phage
- 7:Plasmid
- 8:Virus
- 9:Yeast

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The type of the resource.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Taxon name

indice del campo: 210 Tipo di campo: text valori autorizzati:

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: Taxon name including genus, species and variant names, as taken from an authoritative nomenclature reference, including Mycobank for fungi and yeasts, the Prokaryotic Nomenclature Up-to-date for bacteria and archaea, AlgaeBase for algae and cyanobacteria, and ICVT for viruses.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Infrasubspecific names

indice del campo: 211
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Infrasubspecific names including biovar, chemovar, cultivar, morphovar, pathovar, phagovar, serovar, forma specialis, phase.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Comment on taxonomy

indice del campo: 212 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Any comment and/or note on the taxonomy of the strain. It may be used, e.g., for information on new species or revised nomenclatures. It must be used when the Taxon name data field includes a name that is not present in the nomenclature reference.

MIRRI Status

indice del campo: 213
Tipo di campo: textarea
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: For type strains, specify their type (type, neotype, holotype, epitype, etc). A list of allowed values is not defined and this information can be provided as free text. Future improvements of the dataset will likely foresee a list of values.

MIRRI History of deposit

indice del campo: 214 Tipo di campo: text campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Transfers of the strain between isolation and deposit in the CC.

MIRRI Depositor

indice del campo: 215 Tipo di campo: text valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Name, institute and town / country of the depositor. Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Date of deposit

indice del campo: 216 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Date when the strain was deposited at the CC (YYYY-MM-DD)

MIRRI Collected by

indice del campo: 217 Tipo di campo: text campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Name, institute and town / country of the collector. Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Date of collection

indice del campo: 218 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Date when the sample was collected. (YYYY-MM-DD) Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Isolated by

indice del campo: 219
Tipo di campo: text
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Name, institute and town / country of the isolator. Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Date of isolation

indice del campo: 220 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Date when the strain was isolated from the sample. (YYYY-MM-DD)

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Date of inclusion in the catalogue

indice del campo: 221 Tipo di campo: date

valori autorizzati: Gli unici formati di date accettati sono AAAA-MM-GG, AAAA-MM o AAAA

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Date when the strain was included in the catalog and/or an accession number

was assigned to it.

MIRRI Tested temperature growth range

indice del campo: 222

Tipo di campo: 2 valori decimali separati da un segno meno (-)

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: The lowest and the highest temperature at which the strain was tested for

growing. Example: 15;35

Usare il punto (.) come separatore decimale

Esempio di valori validi:

- 25-37.5
- 36-38

MIRRI Recommended growth temperature

indice del campo: 223

Tipo di campo: numero a virgola

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The recommended growing temperature for the strain. Example: 24

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Recommended medium for growth

indice del campo: 224
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The medium that is recommend for growing the strain. Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo XXX

MIRRI Form of supply

indice del campo: 225

Tipo di campo: multiselect

valori autorizzati:

- Agar
- Cryo
- Dry ice
- Liquid Culture Medium
- Lyo
- Oil
- Water

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The forms of supply of the strain to users.

MIRRI Other denomination

indice del campo: 226 Tipo di campo: text valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Unofficial names that are often used for the strain, e.g. in publications, or a

name given to the strain by the isolator before its deposit at the collection.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del acronym

MIRRI Coordinates of geographic origin

indice del campo: 227

Tipo di campo: 2 valori decimali separati da un punto virgola (;)

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: The geographic coordinates of the location where the sample was collected.

(decimal coordinates)

Questo campo è compilato automaticamente con i valori dei campi latitude e longitude

MIRRI Altitude

indice del campo: 228

Tipo di campo: numero intero positivo o negativo

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: The altitude of the location where the sample was collected.

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo altitude.

MIRRI Geographic origin

indice del campo: 229
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: Y
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: Y

Descrizione del campo: The locality where the sample was collected, defined with the highest possible precision. Example: Altafjorden, Alta, Troms og Finnmark, Norway

Questo campo è compilato automaticamente con i valori dei campi continent, country, state, town, place.

MIRRI GMO

indice del campo: 230 Tipo di campo: select valori autorizzati:

- 0:Not known
- 1:No

• 2:Yes

campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Specify whether the strain is a Genetically Modified Organism (GMO).

Questo campo è compilato automaticamente con il valore del campo altitude.

MIRRI GMO construction information

indice del campo: 231 Tipo di campo: textarea campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on the construction of the GMO.

MIRRI Mutant information

indice del campo: 232 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on mutant strains.

MIRRI Genotype

indice del campo: 233 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on the genotype of the strain.

MIRRI Literature

indice del campo: 234 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on literature linked to the identification and properties of the strain. Does not include literature related to the sequence of the strain. For publications indexed by Pubmed or

having an official DOI number, collections should provide the relative identifiers, respectively PMIDs and DOIs.

MIRRI Sexual state

indice del campo: 235 Tipo di campo: select

/MTLalpha|MAT1-1|MAT1-2|MAT1|MAT2

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on strain sexual state / mating type, for relevant resource types.

MIRRI Ploidy

indice del campo: 236 Tipo di campo: select

valori autorizzati:0:Aneuploid|1:Haploid|2:Diploid|3:Triploid|4:Tetraploid|9:Polyploid over 4n

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information on the ploidy level of the strain.

MIRRI Interspecific hybrid

indice del campo: 237 Tipo di campo: select

valori autorizzati:0:Not known|1:No|2:Yes

campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: This field reports whether the strain is an interspecific hybrid.

MIRRI Pathogenicity

indice del campo: 239 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about pathogenicity of the strain for plants, humans and animals.Can include specification for the Belgian plant pathogenicity code.

MIRRI Enzyme production

indice del campo: 240

Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about enzyme production by the strain.

MIRRI Production of metabolites

indice del campo: 241 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about metabolite production by the strain.

MIRRI Applications

indice del campo: 242 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about applications of the strain.

MIRRI Remarks

indice del campo: 243 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Any further note that is not present in the other fields.

MIRRI Plasmids

indice del campo: 244 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N Descrizione del campo:Information about plasmids in the strain. It may include plasmid name and type (original plasmid, cloning vehicle, recombinant plasmid), restriction sites, relevant genes (e.g., origin of replication, transposons, promoters, terminators, structural genes).

MIRRI Plasmids collections fields

indice del campo: 245 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: N Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about availability of strain plasmids in CCs of plasmids.

MIRRI Substrate/host of isolation

indice del campo: 246 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about the substrate and the host of isolation of the strain. It may include the detailed substrate from which the strain was isolated and the name of host plant/animal.

MIRRI Isolation habitat

indice del campo: 247 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about the biotope where the species was found. It should include environmental physical factors, such as humidity, range of temperature, pH and light intensity, as well as biotic factors, such as theavailability of food and the presence or absence of predators. It may also include information already specified in the related fields Geographic origin, Geographic origin coordinates and Altitude.

MIRRI Ontobiotope term for the isolation habitat

indice del campo: 248
Tipo di campo: text
valori autorizzati:
campo automatico: N
Minimum Data Set: N
Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo:Information about the habitat where the species was found provided by using the most specific term(s) of the Ontobiotope ontology of microorganism habitats. Note that this

ontology is mainly for bacteria. See the Ontobiotope browser (http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/ONTOBIOTOPE?p=classes)

MIRRI Gene sequences and accession numbers

indice del campo: 249 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Known genomic sequences and related INSDC accession numbers of the strain. According to the resource type, these include, but are not limited to, the nuclearribosomal Internal Transcribed Spacer (ITS), the nuclear ribosomal LargeSubUnit (LSU) and the 16S rRNA gene. Any further gene or marker that is considered of relevance by the CC, such as Calmodulin (CaM) and β -Tubulin, can be included.

MIRRI Literature linked to the sequence/genome

indice del campo: 250 Tipo di campo: textarea

valori autorizzati: campo automatico: Y Minimum Data Set: N Campo obbligatorio: N

Descrizione del campo: Information on literature linked to the sequences or genome of the strain. Do not include here literature linked to the identification and properties of thestrain. Include identifiers linking to a separate literature sheet in the same file. For publications indexed by Pubmed or having an official DOI number, collections should provide the relative identifiers, respectively PMIDs and DOIs.